

Slab MIP を HCC_001 で試す

厚みのある範囲を 1 枚に投影して、血管や骨・石灰化のつながりを見やすくする機能です。2D・MPR・3D の 3 か所で使えます。

MIP 最大値


MinIP 最小値

AvgIP 平均

準備

- 01 demo.vis-ionary.com を開く
デスクトップ版でも同じ手順です
- 02 スタディー一覧で患者 ID **HCC_001** を検索
- 03 2D は **#3 C-A-P** (造影)、MPR・3D は **#2 PRE LIVER** を選ぶ
どちらもスライス厚 5 mm の CT
- 04 ツールバーの 2D Viewer・MPR Viewer・3D Viewer で開く

厚みを付けて、スライスを送る

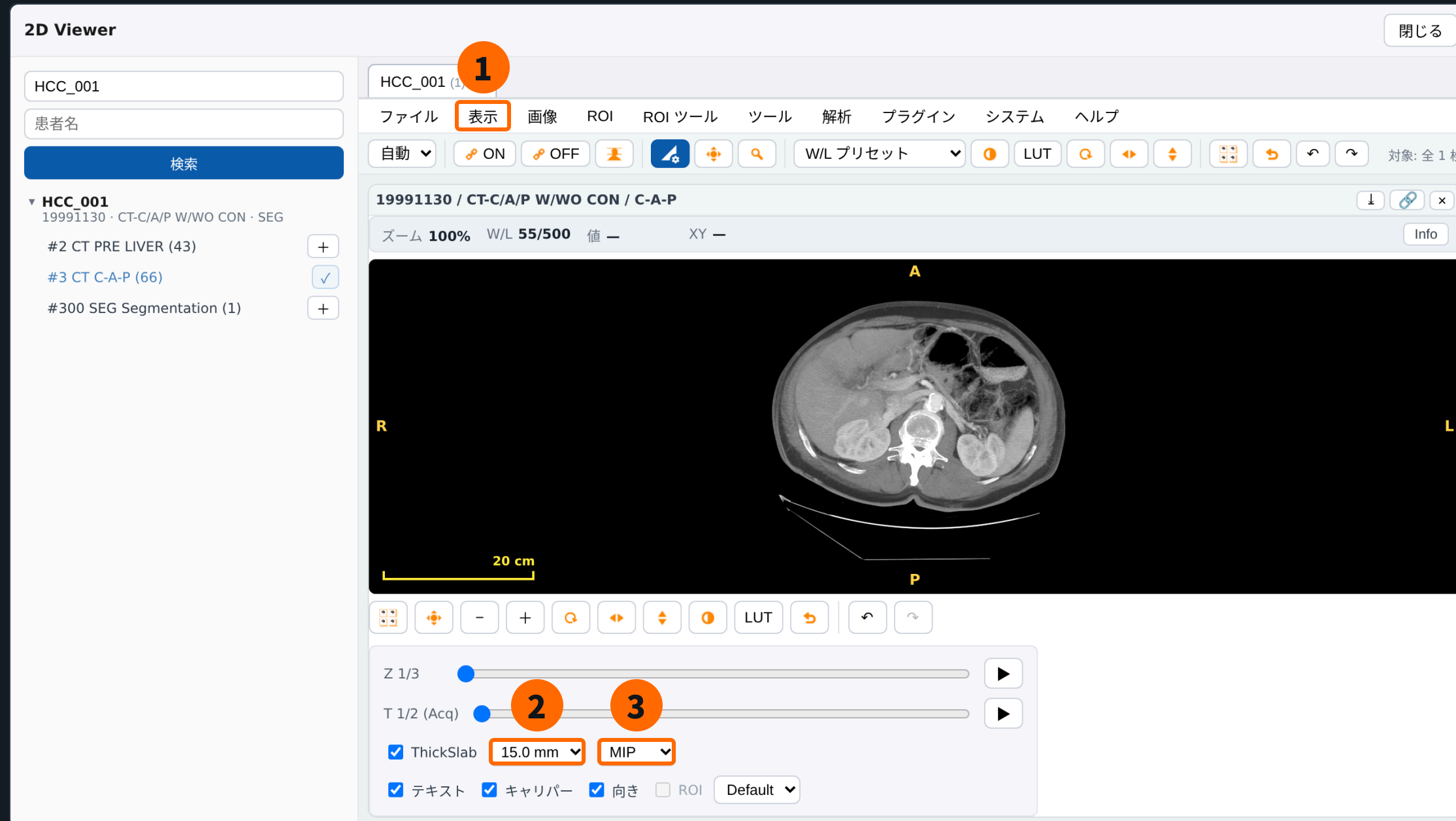


- 1 メニュー「表示」→「Slab MIP」→「MIP（最大値投影・5mm）」
- 2 ThickSlab の厚みを **15 mm** に。造影された血管が線としてつながります
- 3 投影方式を切り替え。MIP・MinIP・AvgIP

ホイールで送ると、厚みを保ったまま上下に動きます。

ThickSlab 中は ROI・計測を作れません。測るときは Original に戻します。

3 断面すべてにスラブを掛ける

① ②

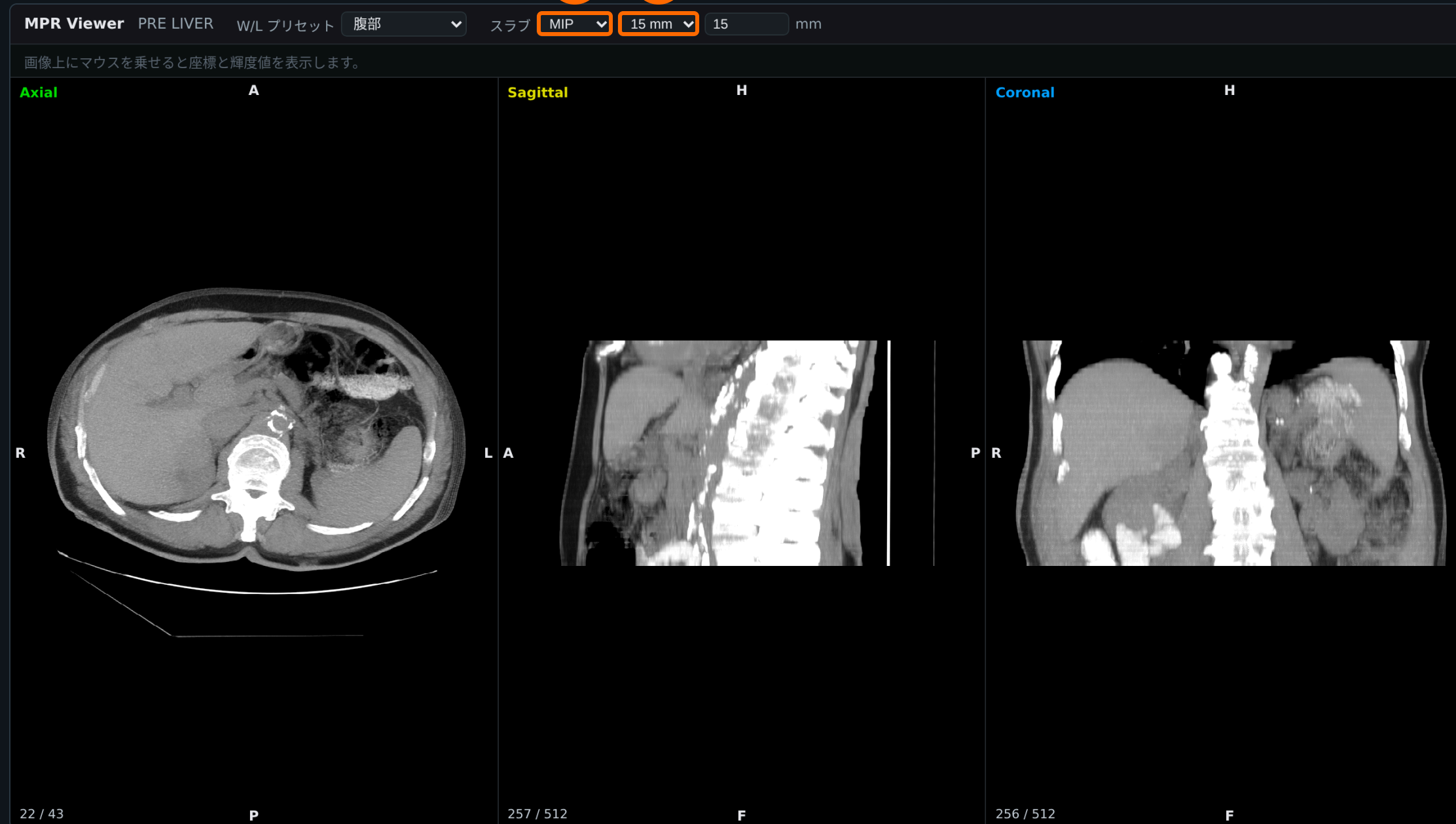


- ① ヘッダの「スラブ」で **MIP** を選ぶ
- ② 厚み（全幅 mm）を **15** に。Axial・Sagittal・Coronal の3面に同時に効きます

5 mm 未満は元の画像とほぼ同じ。10 mm 以上で違いが分かります。

MinIP は 3 mm、AvgIP は 5 mm が目安。W/L プリセットは「腹部」にしています。

スラブを回して、狙った構造を中心にする

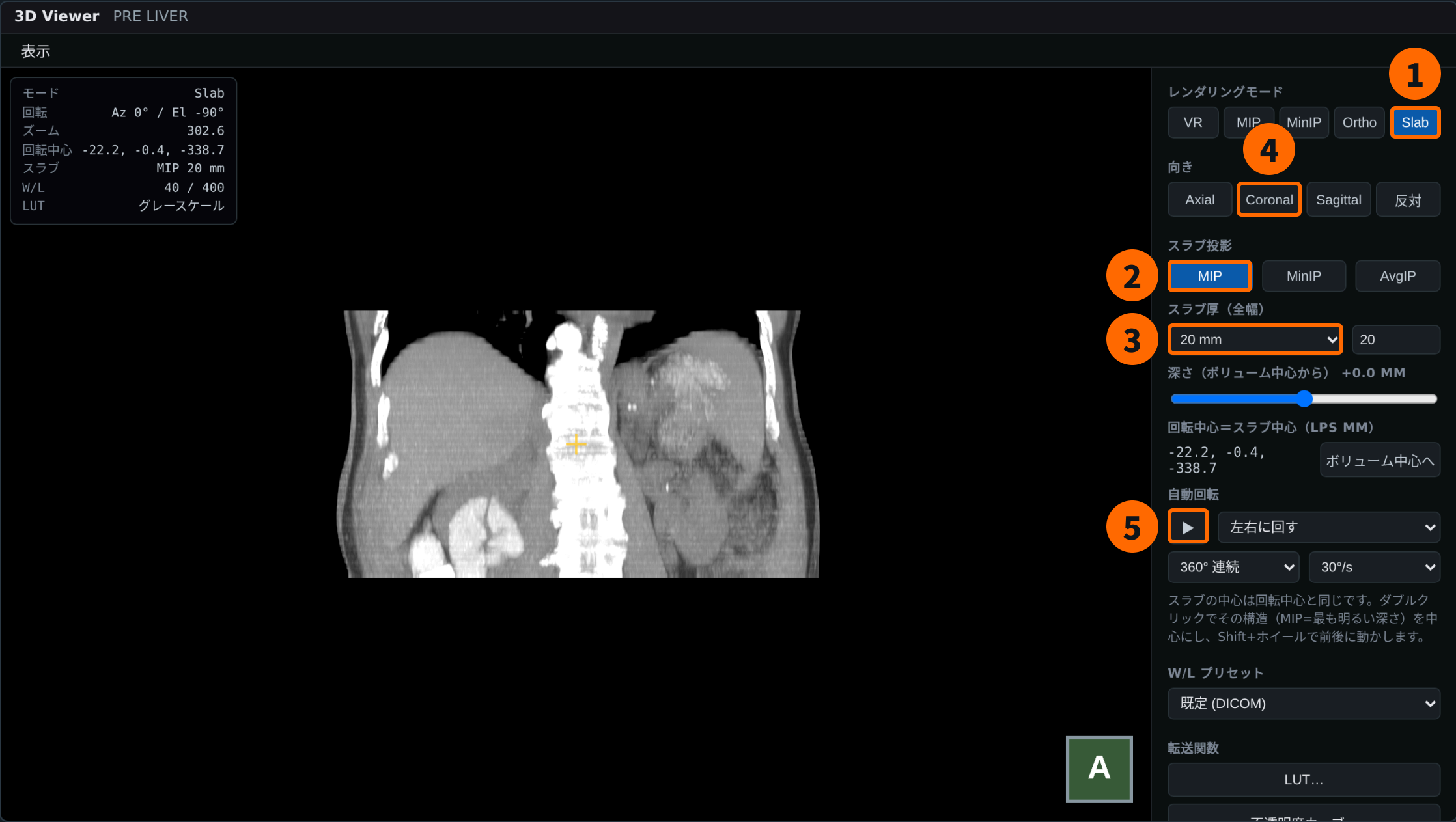

- 1 レンダリングモード「Slab」
- 2 スラブ投影「MIP」
- 3 スラブ厚 20 mm
- 4 向き「Coronal」で正面から
- 5 自動回転▶で左右に回して見せる

操作	動き
ダブルクリック	最も明るい深さを回転中心に
Shift+ホイール	スラブと回転中心が前後に
左ドラッグ	回転中心のまわりで回る